





140 Micron

16 Bit Resolución

9.4 Megapixel

### Baja Dosis Gadox y Cesio Centelleador | Más Rápido AED | 14 "x 17" CaseteDR

El **AirDR™-P** es un producto de iCRco's familia Premium de AirDR™. El **AirDR™-P** está equipado con un centelleador Gadox y Cesio depositado directamente que proporciona una calidad de imagen superior. El panel de 14 "x 17" tamaño minimiza la dosis del paciente y mejora el rendimiento.

El **AirDR™-P** es nuestra solución de radiografía digital de dosis baja más avanzada. Cuando se combina con el software **XC™** de procesamiento, los imágenes quedan robusto y rico. **XC™** proporciona imágenes de calidad superior cada vez con una opción para manipular aún más las imágenes.

# **IMAGEN**

### AIRDR-P | 140 µm DR

El AirDR™-P usa el centelleador basado de Cesio o Gadox para crear imagenes superior. El AirDR™P muestra una escala de grises disponible de 16 bits y la matriz activa de 140 micras. Es el unico líder en el mercado que garantiza una resolución de imagen de hasta 3.4 lp / mm.

## **CAPTURAR**

### **XC | ACQUISITION**

El XC™ trabaja con la pantalla táctil en proporcionar ICE-4 realzamiento procesando de completamente nuevas características que incluyen, "Visualización de Imagen" para garantizar una presentación igual de ambos tejidos blandos, estructuras óseas superpuestas y análisis automático de las características del imagen para optimizar el procesamiento.

# **REVISIÓN**

#### **CLARITY PACS**

Nuestro solucion PACS totalmente habilitadas e integradas para la web, ayudan a hacer la transición de su práctica a un entorno seguro y sin cassette. **Clarity PACS™** es compatible con todas sus necesidades de imágenes para hoy y el futuro.

icrco.com



El sistema **AirDR™P** ha sido especialmente diseñado y optimizado para avanzar en el equipo de imágenes que está utilizando en este momento. Utilizando su factor de forma único y detección de exposición automática (AED) integrada, el sistema **AirDR™P** es compatible con cualquier sistema de rayos X diseñado para trabajar con cassettes de 35 x 43 cm que cumplen con ISO 4090.

## **AirDR™P Especificaciones**

Panel	Silicio amorfo TFT activo / matriz de diodos, construcción de fibra de carbono
Centelleador	Depósito directo: Yoduro de Cesio
Matriz de píxeles	3328 x 2816 = 9.4 Megapixel
Tamaño de píxel	140 μm
Datos de imagen	16 bit
Tiempo de transferencia de imagen	Alambrado: 500 ms; Inalámbrico: 3000 ms
Área activa	Verdadero 35 cm x 43 cm (14" x 17")
Dimensiones externas	L15.11"x H18.11"X W.59"
Peso	6.17 lbs / 2.8 kg
Capacidad de peso	Peso máximo de carga: 150 kg
Indicación de estado	Pantalla OLED (Wifi / LAN / Batería / Sensor)
Datos inalámbricos I / F	Estándar WiFi 802.11n 5GHz
Datos cableados I / F	GigE a través de la conexión de alimentación y comunicación opcional
Rayos XI/F	Detección automática de exposición (AED)
Resolución limitante	3.4 lp/mm
MTF Típico	> 77% at 0.5 lp/mm
DQE Típico	> 57% at 1 lp/mm
Ambiente	10 - 40° C en funcionamiento, 20 - 75% HR en funcionamiento (sin condensación)
Batería	Batería recargable, 11.1 V, hasta 8 horas
Cargador de batería	Cargador externo de dos compartimentos 100-240 V AC, 50/60 Hz
Interfaz y unidad de potencia	IPU AirDR opcional con fuente de alimentación externa de 100-240 V AC, GigE y Rayos X I/F

<sup>\*</sup> Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El procesamiento y la visualización dependen del tiempo de la velocidad del procesador, el tiempo de acceso al disco RAM y la tarjeta de video.

- √ No es necesario modificar su generador, o bucky
- √ No es necesario reemplazar sus cuadrículas
- √ No es necesario descartar su soporte de pared o mesa
- √ Clasificación IP-42 resistente al agua y al polvo
- √ Durabilidad de construcción de fibra de carbono
- √ Instalación el mismo día

## Funciones del software de adquisición XC

XC - Adquisición intuitiva de pantalla táctil

Procesamiento ICE-4: análisis de características de imagen automatizado para una mejora máxima de la imagen

Estado de visualización de la imagen: mejora automática de la visualización de la imagen en el punto de adquisición


Opciones inteligentes de búsqueda, clasificación y filtro

Integración con sistemas de gestión de front office como RIS y EMR

Conjunto completo de herramientas de anotación y medición

Configuraciones y privilegios preferidos por el usuario

### **Dimensión Exterior**

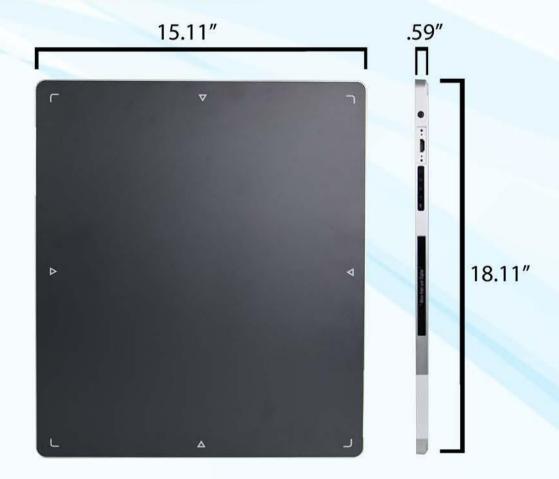



Los componentes están hechos de 98% de piezas reciclables  $\cdot$  iCRco es una compañía certificada ISO 13485  $\cdot$  Patentes estadounidenses e internacionales otorgadas  $\cdot$  Patentes adicionales pendientes  $\cdot$  FDA 510 (K) Autorizada  $\cdot$  Marca CE médica